





JD NEX

eXtinde-ți posibilitățile

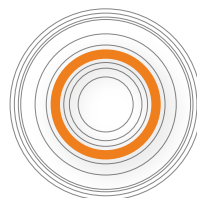

conexiune conică

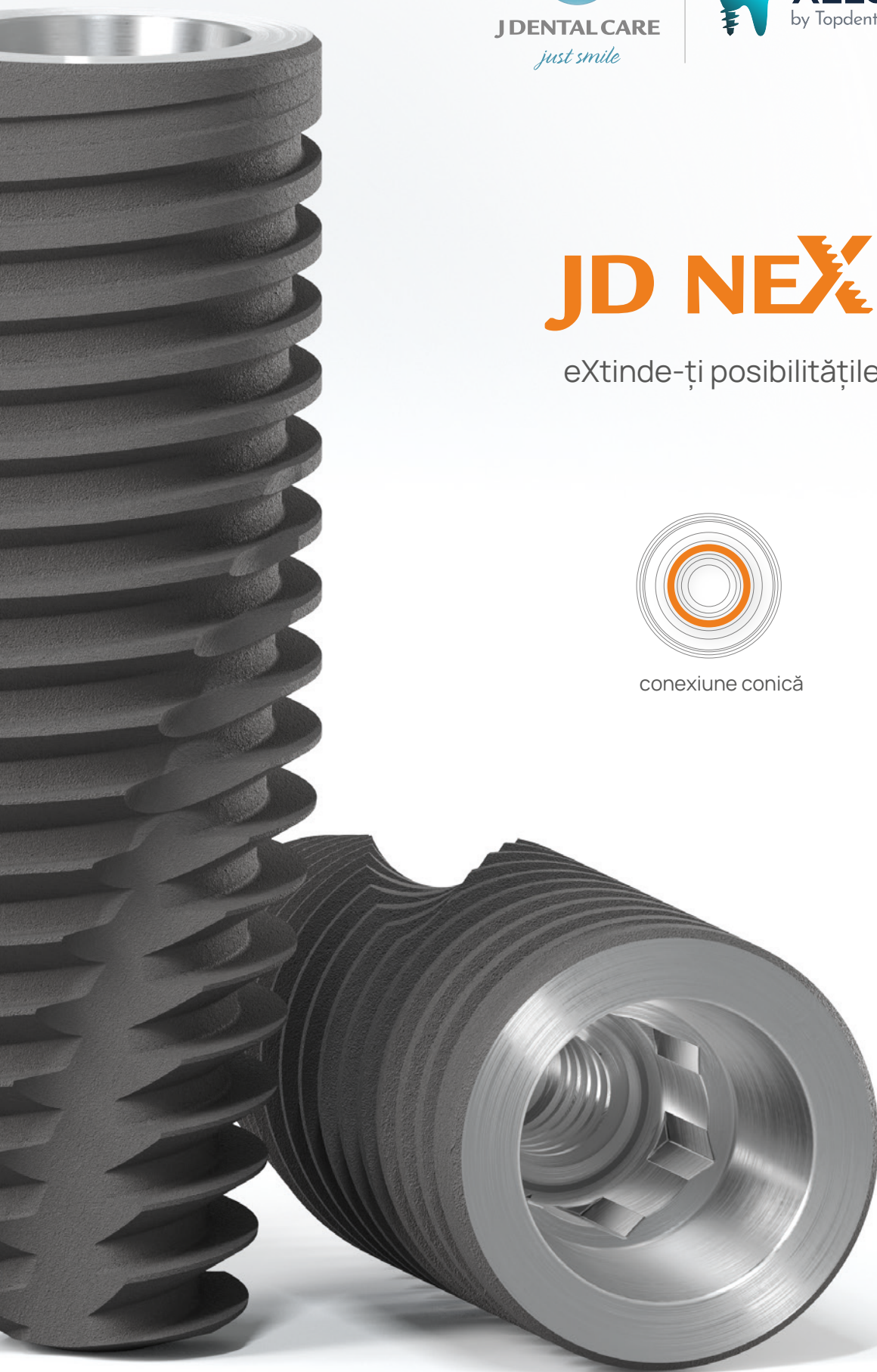

Fabricat în Italia

EXTINDE-ȚI POSIBILITĂȚILE

Linia de implanturi JDNeX a fost concepută pentru a asigura o flexibilitate optimă atât pentru restaurările unidentare, cât și pentru reabilitările Full Arch on X.

Spire progressive

Spire ascuțite și agresive în zona apicală, combinate cu spire mai groase în zona corticală, pentru o angajare osoasă superioară și stabilitate optimă.

Canale de tăiere elicoidale

Canalele elicoidale, extinse până la apex, îmbunătățesc capacitatea autofiletantă, fluiditatea inserției și controlul în timpul poziționării.

Profil hibrid

Corp coronar cilindric combinat cu un design apical conic. Designul cilindro-conic reproduce mai fidel forma naturală a rădăcinii dentare și asigură o inserție lină și controlată a implantului.

Plasare subcrestală

Diametrul redus al platformei permite o poziționare subcrestală mai profundă și un management controlat al țesuturilor moi.

Grosime coronară consolidată

Peretele coronar consolidat crește rezistența structurală și fiabilitatea biomecanică în zonele supuse unor încărcări funcționale mari.

Conexiune conică 16°


Proiectată cu precizie pentru etanșare ermetică, stabilitate mecanică și performanță optimă chiar și în spații protetice reduse, prin bonturi mai subțiri.

Conexiune profundă

Suprafață de contact extinsă între bont și implant, pentru stres redus și o adaptare mai precisă.

Conexiune protetică unică

Platformă protetică unică Ø3.0 mm pentru întreaga gamă de implanturi.

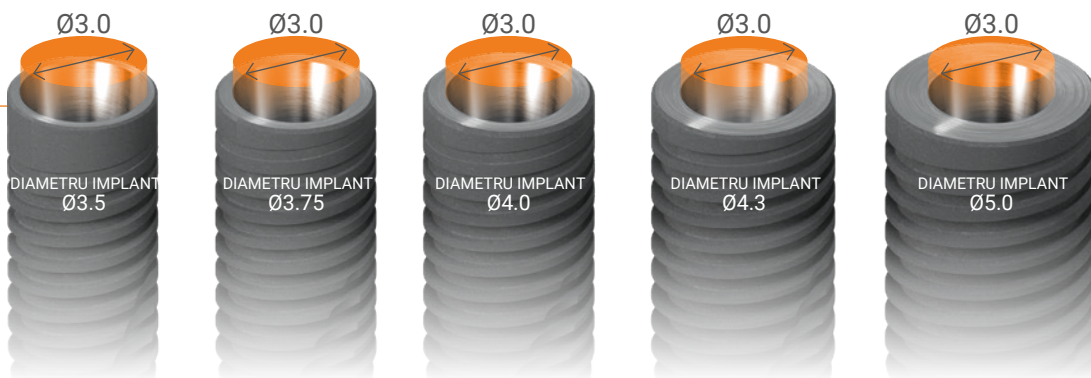


SPECIFICAȚII TEHNICE

Implanturile dentare JDNeX sunt disponibile în diametrele și lungimile din tabelul următor:

DIAMETRU IMPLANT	LUNGIME	DIAMETRU VÂRF	INTERFAȚĂ BONT
Ø 3.5	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4	3
Ø 3.75	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4	3
Ø 4.0	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.6	3
Ø 4.3	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.8	3
Ø 5.0	8, 10, 11.5, 13	3.1	3

Notă: toate dimensiunile sunt în mm

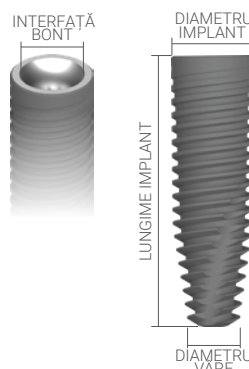

CATALOG DE PRODUSE

Implanturi:

Ø 3.5

NE35080	JDNeX Ø 3.5 L 8
NE35100	JDNeX Ø 3.5 L 10
NE35115	JDNeX Ø 3.5 L 11.5
NE35130	JDNeX Ø 3.5 L 13
NE35150	JDNeX Ø 3.5 L 15
NE35180	JDNeX Ø 3.5 L 18

Ø 3.75

NE37080	JDNeX Ø 3.75 L 8
NE37100	JDNeX Ø 3.75 L 10
NE37115	JDNeX Ø 3.75 L 11.5
NE37130	JDNeX Ø 3.75 L 13
NE37150	JDNeX Ø 3.75 L 15
NE37180	JDNeX Ø 3.75 L 18

Ø 4.0


NE40080	JDNeX Ø 4.0 L 8
NE40100	JDNeX Ø 4.0 L 10
NE40115	JDNeX Ø 4.0 L 11.5
NE40130	JDNeX Ø 4.0 L 13
NE40150	JDNeX Ø 4.0 L 15
NE40180	JDNeX Ø 4.0 L 18

Ø 4.3

NE43080	JDNeX Ø 4.3 L 8
NE43100	JDNeX Ø 4.3 L 10
NE43115	JDNeX Ø 4.3 L 11.5
NE43130	JDNeX Ø 4.3 L 13
NE43150	JDNeX Ø 4.3 L 15
NE43180	JDNeX Ø 4.3 L 18

Ø 5.0

NE50080	JDNeX Ø 5.0 L 8
NE50100	JDNeX Ø 5.0 L 10
NE50115	JDNeX Ø 5.0 L 11.5
NE50130	JDNeX Ø 5.0 L 13

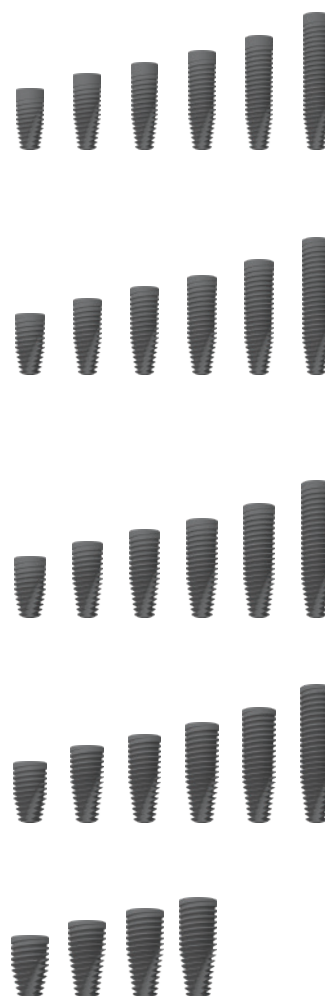

Șurub de închidere:

NECS	Șurub de închidere JDNeX
------	--------------------------



Formatoare gingivale:


NEHA43	Formator gingival Ø 4.0 H 3.0 JDNeX
NEHA45	Formator gingival Ø 4.0 H 5.0 JDNeX
NEHA47	Formator gingival Ø 4.0 H 7.0 JDNeX
NEHA53	Formator gingival Ø 5.0 H 3.0 JDNeX
NEHA55	Formator gingival Ø 5.0 H 5.0 JDNeX
NEHA57	Formator gingival Ø 5.0 H 7.0 JDNeX
NEHA63	Formator gingival Ø 6.0 H 3.0 JDNeX
NEHA65	Formator gingival Ø 6.0 H 5.0 JDNeX
NEHA67	Formator gingival Ø 6.0 H 7.0 JDNeX
NEHA753	Formator gingival Ø 7.5 H 3.0 JDNeX
NEHA755	Formator gingival Ø 7.5 H 5.0 JDNeX



Transfere de amprentă:


LINGURĂ DESCHISĂ

NEICOTC	Transfer de amprentă lingură deschisă antirotațional JDNeX
NEICOTNEC	Transfer de amprentă lingură deschisă rotațional JDNeX
NEICOTS	Șurub pentru transfer de amprentă lingură deschisă JDNeX
NEICOTLTC	Transfer de amprentă lung, lingură deschisă, antirotațional JDNeX
NEICOTNELC	Transfer de amprentă lung, lingură deschisă, rotațional JDNeX
NEICOTSL	Șurub pentru transfer de amprentă lung, lingură deschisă JDNeX

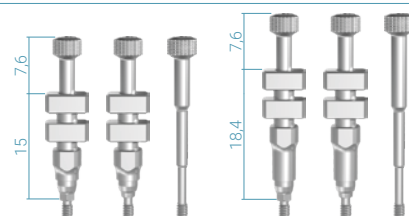

LINGURĂ ÎNCHISĂ


NEICCTC	Transfer de amprentă lingură închisă antirotațional JDNeX
NEICCTS	Șurub pentru transfer de amprentă lingură închisă JDNeX
NEICCTLTC	Transfer de amprentă lung, lingură închisă, antirotațional JDNeX
NEICCTLS	Șurub pentru transfer de amprentă lung, lingură închisă JDNeX

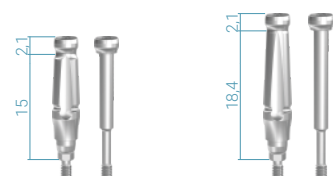

Bonturi provizorii:

NETAEC	Bont provizoriu antirotațional JDNeX
NETANEC	Bont provizoriu rotațional JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm

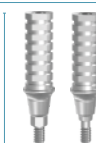

Bonturi drepte:

NESA4510C	Bont drept Ø 4.5 H 1.5 JDNeX
NESA4520C	Bont drept Ø 4.5 H 2.0 JDNeX
NESA4520NEC	Bont drept rotațional Ø 4.5 H 2.0 JDNeX
NESA4540C	Bont drept Ø 4.5 H 4.0 JDNeX
NESA4540NEC	Bont drept rotațional Ø 4.5 H 4.0 JDNeX
NESA5020C	Bont drept Ø 5.0 H 2.0 JDNeX
NESA5020NEC	Bont drept rotațional Ø 5.0 H 2.0 JDNeX
NESA5040C	Bont drept Ø 5.0 H 4.0 JDNeX
NESA5040NEC	Bont drept rotațional Ø 5.0 H 4.0 JDNeX
NESA6020C	Bont drept Ø 6.0 H 2.0 JDNeX
NESA6040C	Bont drept Ø 6.0 H 4.0 JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm



Cuplu recomandat 30 Ncm



Bonturi GP:

NEGPA40C	Bont GP Ø 4.0 JDNeX
NEGPA50C	Bont GP Ø 5.0 JDNeX
NEGPA60C	Bont GP Ø 6.0 JDNeX
NE15GPAEC	Bont GP 15° JDNeX
NE25GPAEC	Bont GP 25° JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm



Bonturi anatomice:

NE15A15C	Bont anatomic angulat 15° Ø 5.0 H 1.5 JDNeX
NE15A30C	Bont anatomic angulat 15° Ø 5.0 H 3.0 JDNeX
NE25A15C	Bont anatomic angulat 25° Ø 5.0 H 1.5 JDNeX
NE25A30C	Bont anatomic angulat 25° Ø 5.0 H 3.0 JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm



Bont din cobalt-crom

NECCEC	Bont din cobalt-crom antirotațional JDNeX
NECCNEC	Bont din cobalt-crom rotațional JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm



Șuruburi protetice:

NES	Șurub protetic JDNeX scurt
NESL	Șurub protetic JDNeX lung
NEST	Șurub protetic JDNeX pentru bont provizoriu, din cobalt-crom și pre-frezat
NESA	Șurub protetic angulat JDNeX *


Cuplu recomandat 30 Ncm



Bonturi conice:

NENCA15C	Bont conic H 1.5 JDNeX
NENCA30C	Bont conic H 3.0 JDNeX
NENCA40C	Bont conic H 4.0 JDNeX
NECA1715C	Bont conic angulat 17° H 1.5 JDNeX
NECA1725C	Bont conic angulat 17° H 2.5 JDNeX
NECA1735C	Bont conic angulat 17° H 3.5 JDNeX
NECA3015C	Bont conic angulat 30° H 1.5 JDNeX
NECA3025C	Bont conic angulat 30° H 2.5 JDNeX
NECA3035C	Bont conic angulat 30° H 3.5 JDNeX

Cuplu recomandat 30 Ncm

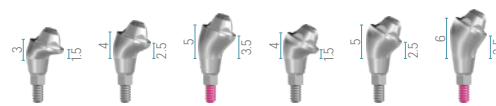

Cuplu recomandat 30 Ncm

EVCAPS	Șurub protetic pentru bont conic JDEvolution **
EVCAPSA	Șurub protetic angulat pentru bont conic JDEvolution *
EVCAPSNA	Șurub protetic pentru bont conic Direct N ***
EVCAPSNA	Șurub pentru bont conic angulat Direct N *
EVCAICOTEC	Transfer de amprentă lingură deschisă antirotațional pentru bont conic JDEvolution **
EVCAICOTC	Transfer de amprentă lingură deschisă pentru bont conic JDEvolution **
EVCAICOTLC	Transfer de amprentă lung, lingură deschisă, pentru bont conic JDEvolution **
EVCAICOT02	Șurub pentru transferul bontului conic, lingură deschisă JDEvolution **
EVCAICOT04	Șurub pentru transferul lung al bontului conic, lingură deschisă JDEvolution **
EVCAICCTC	Transfer de amprentă lingură închisă pentru bont conic **
EVCABC	Capac de vindecare pentru bont conic JDEvolution **
EVCABC	Capac de vindecare H 6.0 pentru bont conic JDEvolution **
EVCABC9	Capac de vindecare H 9.0 pentru bont conic JDEvolution **
EVCABC	Capac de vindecare PEEK pentru bont conic JDEvolution **
EVCAGPAEC	Bont GP antirotațional pentru bont conic JDEvolution **
EVCAGPANEC	Bont GP rotațional pentru bont conic JDEvolution **
EVCATANWSC	Bont provizoriu rotațional neted pentru sudură, bont conic JDEvolution **
EVCATANEC	Bont provizoriu rotațional pentru bont conic JDEvolution **
EVCATANWC	Bont provizoriu rotațional pentru sudură, bont conic JDEvolution **
EVCATANEC	Bont de machetare rotațional pentru bont conic **
EVCAR	Analog pentru bont conic

Cuplu recomandat 15 Ncm



Cuplu recomandat 15 Ncm



Cuplu recomandat 15 Ncm

* pentru șurub folosiți șurubelnița angulată pentru JDTorque
 ** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution
 *** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution Plus

TiBase, ScanPost, JDScanBody și analog de implant CAD CAM:

NESBCEC	ScanBody antirotațional JDNeX
EVCASBCEC	ScanBody pentru bont conic JDEvolution
EVCASBCEEC	ScanBody antirotațional pentru bont conic
EVCASBCEESC:	On Top ScanBody pentru bont conic JDEvolution Plus ***
NEHSB53C	On Top ScanBody antirotațional Ø 5.0 H 3.0 JDNeX
NEHSB55C	On Top ScanBody antirotațional Ø 5.0 H 5.0 JDNeX
NEHSB57C	On Top ScanBody antirotațional Ø 5.0 H 7.0 JDNeX
JDSCGIOSE	ScanBody Full Arch Tracer hexagonal ***
JDSCGIOIS	ScanBody Full Arch Tracer
JDSCGIOSR	ScanBody Full Arch Tracer dreptunghiular ***

NETIBC	TiBase antirotațional Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDNeX
NETIBNEC	TiBase rotațional Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDNeX
NETIB15C	TiBase antirotațional Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDNeX
NETIB15NEC	TiBase rotațional Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDNeX
NETIB30C	TiBase antirotațional Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDNeX
NETIB30NEC	TiBase rotațional Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDNeX



Cuplu recomandat 30 Ncm

NETIBNC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIBNENC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB15NENC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDNeX
NETIB20NC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 2.0 C 7.7 JDNeX
NETIB20NENC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 2.0 C 7.7 JDNeX
NETIB30NC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX
NETIB30NENC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDNeX
NETIB40NC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDNeX
NETIB40NENC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDNeX
NETIBNAC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 0.5 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
NETIBNENAC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 0.5 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
NETIB15NAC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 1.5 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
NETIB15NENAC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 1.5 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
NETIB30NAC	TiBase nou antirotațional Ø4.4 H 3.0 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
NETIB30NENAC	TiBase nou rotațional Ø4.4 H 3.0 C 7.7 pentru canal angulat JDNeX *
EVCAITEC	Interfață CAD CAM antirotațională pentru bont conic JDEvolution (H 7.5) **
EVA139C	TiBase antirotațional pentru bont conic (H 5.0) **
EVCAITC	Interfață CAD CAM rotațională pentru bont conic JDEvolution (H 7.3) **
EVCATIBC	TiBase pentru bont conic JDEvolution (H 5.0) **
EVCAITAC	Interfață CAD CAM rotațională pentru bont conic, canal angulat (H 7.7) **
EVS110	Șurub protetic pentru bont conic Direct ***
EVS111	Șurub protetic lung pentru bont conic Direct ***
EVS112	Șurub protetic pentru canal angulat, bont conic Direct ****
NEANC	Analog de implant CAD CAM JDNeX
EVCAARCN	Analog CAD CAM nou pentru bont conic
NEPMNC	Semifabricat bont pre-frezat JDNeX

* pentru șurub folosiți șurubelnița angulată pentru JDTorque

** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution

*** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution Plus

**** pentru șurub folosiți șurubelnița angulată pentru bont conic Direct JDTorque



Bonturi conice MINI:

NENCA15MIC	Bont conic MINI H 1.5 JDNeX
NENCA30MIC	Bont conic MINI H 3.0 JDNeX
NENCA40MIC	Bont conic MINI H 4.0 JDNeX
EVCAHCMIC	Capac de vindecare pentru bont conic MINI **
EVCAHCLMIC	Capac de vindecare H 6.0 pentru bont conic MINI **
EVCAITMIC	Interfață CAD CAM rotațională H 7.0 pentru bont conic MINI **
EVCAITMIEC	Interfață CAD CAM antirotațională H 7.0 pentru bont conic MINI **
EVCATIBMIC	Interfață CAD CAM rotațională H 5.0 pentru bont conic MINI **
EVCATIBMIEC	Interfață CAD CAM antirotațională H 5.0 pentru bont conic MINI **
EVCATANEMIC	Bont provizoriu rotațional pentru bont conic MINI **
EVCAICOTMIC	Transfer de amprentă lingură deschisă pentru bont conic MINI **
EVCAICOTMIEC	Transfer de amprentă lingură deschisă antirotațional pentru bont conic MINI **
EVCAARMIC	Analog pentru bont conic MINI
EVCAARMIC	Analog CAD CAM pentru bont conic MINI
EVCASBCEMIC	ScanBody pentru bont conic MINI **
EVCASBCEMIEC	ScanBody antirotațional pentru bont conic MINI **
EVCASBCESMIC	On Top ScanBody pentru bont conic MINI ***

** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution

*** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution Plus



Bonturi Octa:

NEOA15	Bont Octa H 1.5 JDNeX
NEOA30	Bont Octa H 3.0 JDNeX
NEOA40	Bont Octa H 4.0 JDNeX
ICOAHC.	Capac de vindecare pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOAHC54.	Capac de vindecare pentru bont Octa D 5.0 H 4.0 JDIcon Plus **
ICOAICOTC.	Transfer de amprentă lingură deschisă pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOAICOTEC.	Transfer de amprentă lingură deschisă antirotațional pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOAR.	Analog pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOAPS.	Șurub protetic pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOAPSA.	Șurub protetic angulat pentru bont Octa JDIcon Plus *
ICOAWANEC.	Bont de machetare rotațional pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOATANEC.	Bont provizoriu rotațional pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOATAEC.	Bont provizoriu antirotațional pentru bont Octa JDIcon Plus

Cuplu recomandat 30 Ncm

Cuplu recomandat 30 Ncm

Cuplu recomandat 30 Ncm



ICOAITC.	Interfață CAD CAM pentru bont Octa JDIcon Plus (Ø4.45 C7.3) **
ICOAITEC.	Interfață CAD CAM antirotațională pentru bont Octa JDIcon Plus (Ø4.45 C7.3) **
ICOATIBC.	TiBase pentru bont Octa JDIcon Plus (Ø4.45 C5.0) **
ICOATIBEC.	TiBase antirotațional pentru bont Octa JDIcon Plus (Ø4.45 C5.0) **
ICOASBCEC.	ScanBody pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOASBCEEC.	ScanBody antirotațional pentru bont Octa JDIcon Plus **
ICOARC.	Analog CAD CAM pentru bont Octa JDIcon Plus



Cuplu recomandat 30 Ncm

* pentru șurub folosiți șurubelnița angulată pentru JDTorque
 ** pentru șurub folosiți șurubelnița protetică JDEvolution

Bonturi sferice:

NEBA15	Bont sferic H 1.5 JDNeX
NEBA30	Bont sferic H 3.0 JDNeX
NEBA50	Bont sferic H 5.0 JDNeX
EVBAA	Analog pentru bont sferic
EVBAHC	Capsă de retenție elastică cu container pentru bont sferic
EVBAN	Capsă de retenție pentru bont sferic


Cuplu recomandat 30 Ncm



Bonturi Emi:

NEEMI15	Bont Emi H 1.5 JDNeX
NEEMI30	Bont Emi H 3.0 JDNeX
NEEMI50	Bont Emi H 5.0 JDNeX
EVEMISCK	Atașament Smart cap pentru bont Emi
EVEMIHC	Capsă de retenție elastică cu container pentru bont Emi
EVEMIN	Capsă de retenție elastică pentru bont Emi (1.2 kg)
EVEMIH	Container pentru bont Emi
EVEMIIC	Transfer de amprentă din plastic pentru bont Emi
EVEMIICS	Transfer de amprentă din oțel pentru bont Emi
EVEMINT	Capsă de retenție albă pentru bont Emi (1.8 kg)
EVEMINY	Capsă de retenție galbenă pentru bont Emi (0.6 kg)
EVEMINP	Capsă de retenție violetă pentru bont Emi (2.5 kg)
EVEMINB	Capsă de retenție pentru laborator, bont Emi
EVEMIEIT	Instrument de extragere și inserare a capselor
EVEMIA	Analog pentru bont Emi

Cuplu recomandat 30 Ncm

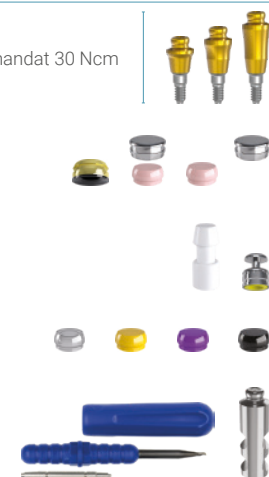


Analog de implant:

NEAN	Analog de implant JDNeX
------	-------------------------




Freze de profilare osoasă:

NEBM5C.	Freză de profilare osoasă Ø 5.0 cu ghidaj JDNeX
NEBM6C.	Freză de profilare osoasă Ø 6.0 cu ghidaj JDNeX
NEBMGN	Ghidaj pentru freza de profilare osoasă JDNeX

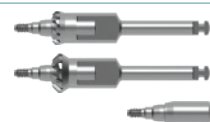

Cheie de inserare și chei protetice:

NEID	Cheie de inserare implant JDNeX
NEIDL	Cheie lungă de inserare implant JDNeX
NESDPF20	Cheie protetică pentru JDTorque L 20 JDNeX
NESDPF25	Cheie protetică pentru JDTorque L 25 JDNeX
NESDPF35	Cheie protetică pentru JDTorque L 35 JDNeX
ICOASDF.	Cheie bont Octa pentru JDTorque
ICOASDFL.	Cheie lungă bont Octa pentru JDTorque
EVSDCAF	Cheie bont conic pentru JDTorque
NESDP25	Cheie protetică L 25 JDNeX
NESDP30	Cheie protetică L 30 JDNeX
EVSDCA	Cheie pentru bont conic
EVSDPF20	Cheie protetică pentru JDTorque L 20
EVSDPF25	Cheie protetică pentru JDTorque L 25
EVSDPF35	Cheie protetică pentru JDTorque L 35

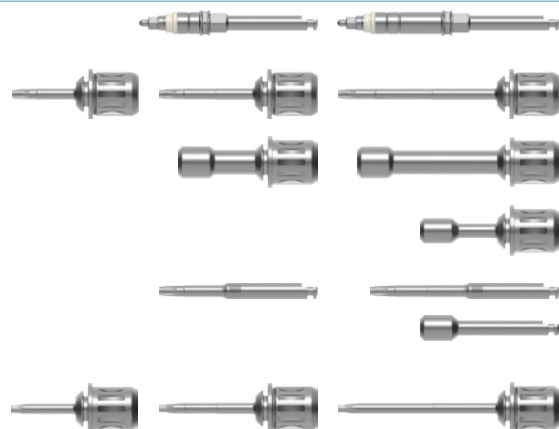

EVSDPF25A	Șurubelniță angulată pentru JDTorque L 25
EVSDPF30A	Șurubelniță angulată pentru JDTorque L 30
EVSDPF25AV	Șurubelniță angulată pentru bont conic Direct JDTorque L 25
EVSDPF30AV	Șurubelniță angulată pentru bont conic Direct JDTorque L 30
EVSDP32AV	Șurubelniță pentru bont conic Direct EVS112 (canal drept)
NEATR27	Cheie de extragere a bontului L 27 JDNeX
NEATR34	Cheie de extragere a bontului L 34 JDNeX
EVSUD	Cheie chirurgicală JDEvolution
JDG	JDGuide



Kituri chirurgicale JDNeX:

JDNeXK	Kit chirurgical JDNeX
JDNeXKS	Kit chirurgical JDNeX cu opritoare de adâncime


Notă: Pentru o prezentare completă a tuturor produselor și instrumentelor dedicate, consultați catalogul kitului chirurgical JDNeX și catalogul de kituri chirurgicale și instrumente.



PROTOCOALE DE FREZARE

Se recomandă respectarea secvenței de frezare de mai jos pentru a asigura stabilitatea primară optimă a implanturilor.

DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE	OS MEDIU-DENS	OS DENS
Ø 3,5	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 +	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 + Freză countersink Ø 3.5
Ø 3,75	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 opțional	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 +	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 + Freză countersink Ø 3.75
Ø 4,0	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 opțional	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 +	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 + Freză countersink Ø 4.0
Ø 4,3	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 opțional	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 +	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 + Freză countersink Ø 4.3
Ø 5,0	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 opțional	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 +	Ø 1.5 freză inițială Ø 2.0 freză inițială Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0+ Freză countersink Ø 5.0

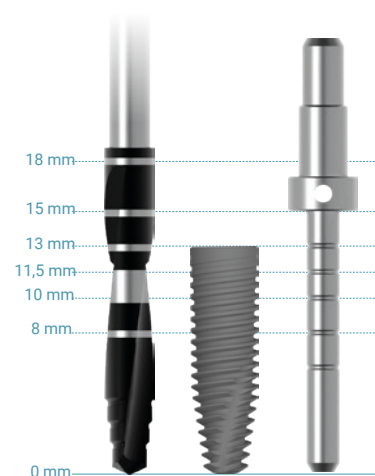

Notă: Toate diametrele sunt indicate în mm

UN SINGUR KIT. DOUĂ CONFIGURAȚII. CONTROL TOTAL.

Conceput exclusiv pentru sistemul de implanturi JDNeX, kitul chirurgical JDNeX reunește freze, chei și accesorii dedicate într-un protocol chirurgical simplificat.

De la inserarea unui singur implant până la reabilitările Full Arch on X, kitul îi însoțește pe clinicieni în fiecare etapă a procedurii, oferind precizie, versatilitate și ușurință în utilizare.

Organizarea intuitivă și cele două configurații disponibile, cu și fără opritoare, simplifică fiecare procedură și oferă flexibilitatea necesară în situații clinice diferite.



Freze standard

Pentru fiecare diametru de implant, frezele standard pregătesc situsul în osul cu densitate redusă. Geometria lor păstrează compresia osoasă și susține stabilitatea primară optimă.

Freze Plus

Pentru fiecare diametru de implant, frezele Plus pregătesc situsul în osul cu densitate medie-mare. Geometria lor urmează fidel profilul implantului, pentru o pregătire mai controlată a situsului.

Freze countersink

Dedicate pregătirii osului creștal. Frezele countersink îmbunătățesc adaptarea porțiunii coronare a implantului și reduc stresul asupra osului cortical.

Freze cu opritor

Folosite împreună cu opritoarele de adâncime JDNeX, asigură o pregătire precisă și previzibilă a situsului, cu libertatea chirurgiei manuale.



Opritoare de adâncime

Sistem de opritoare montate direct pe freze, pentru controlul fizic al adâncimii. Disponibile în diametre îngust, mediu și lat, potrivite fiecărei freze, pentru un control precis al osteotomiei la orice lățime a creștei.



Chei și șurubelnițe

Compatibile cu conexiunile implantare și protetice JDNeX, cheile și șurubelnițele asigură o potrivire precisă și fermă pentru o procedură chirurgicală sigură.


DOUĂ CONFIGURAȚII. UN SINGUR PROTOCOL.



Kit standard - JDNEXK

Libertate operatorie completă

Configurație dedicată chirurgiei implantare convențională, manuale. Include freze chirurgicale, freze countersink, instrumente de inserare a implantului și accesorii necesare pentru protocolul complet, cu deplină libertate operatorie.

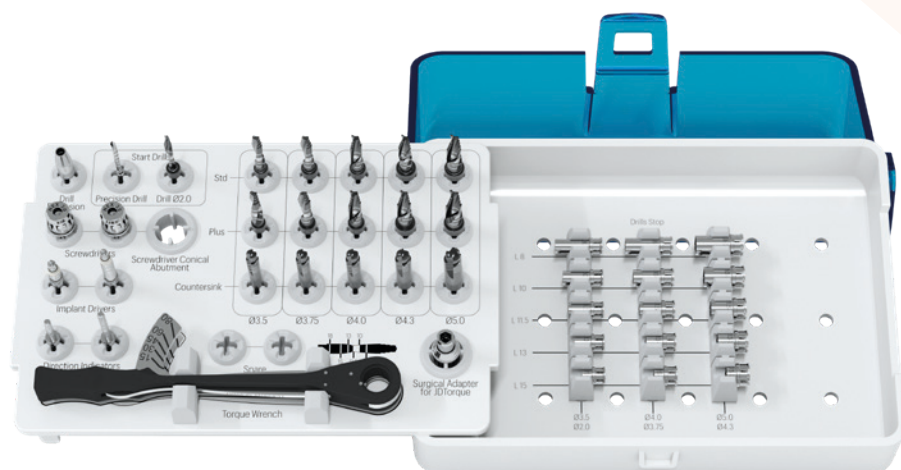

Kit cu opritoare - JDNEXKS


Control și siguranță cu opritoare

Această configurație combină designul frezelor JDNeX cu sistemul de opritoare de adâncime. Opritoarele permit pregătirea la adâncimea planificată, cu libertatea chirurgiei manuale și control fizic al adâncimii.

DETALII TEHNICE EXCLUSIVE

Freză proiectată după geometria implantului

Geometria frezei reproduce profilul implantului, simplificând protocolul de frezare și permițând o pregătire precisă și controlată a situsului.

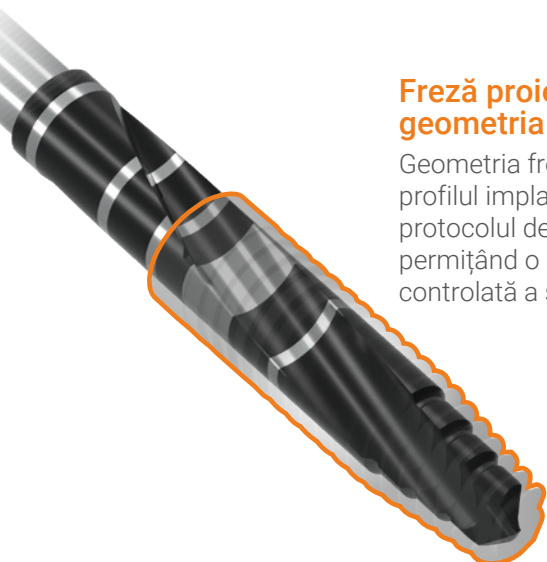

Muchii apicale de tăiere cu diametru incremental

Porțiunea apicală a frezelor are creștături speciale de tăiere, concepute pentru a lărgi progresiv zona apicală a osteotomiei.



CATALOG DE PRODUSE

Kituri chirurgicale JDNeX:

JDNeXK	Kit chirurgical JDNeX
JDNeXKS	Kit chirurgical JDNeX cu opritoare de adâncime



Freze inițiale:

JDPD	Freză de precizie
------	-------------------



Freze standard:

JDDR20	Freză elicoidală Ø 2.0
JDDR35NEX	Freză conică Ø 3.5 JDNeX
JDDR37NEX	Freză conică Ø 3.75 JDNeX
JDDR40NEX	Freză conică Ø 4.0 JDNeX
JDDR43NEX	Freză conică Ø 4.3 JDNeX
JDDR50NEX	Freză conică Ø 5.0 JDNeX
JDDR35NEXP	Freză conică Ø 3.5 Plus JDNeX
JDDR37NEXP	Freză conică Ø 3.75 Plus JDNeX
JDDR40NEXP	Freză conică Ø 4.0 Plus JDNeX
JDDR43NEXP	Freză conică Ø 4.3 Plus JDNeX
JDDR50NEXP	Freză conică Ø 5.0 Plus JDNeX



Frezele standard sunt incluse în kitul chirurgical JDNeXK

Freze cu opritor:

JDDR20STNEX	Freză conică cu opritor Ø 2.0 JDNeX
JDDR35STNEX	Freză conică cu opritor Ø 3.5 JDNeX
JDDR37STNEX	Freză conică cu opritor Ø 3.75 JDNeX
JDDR40STNEX	Freză conică cu opritor Ø 4.0 JDNeX
JDDR43STNEX	Freză conică cu opritor Ø 4.3 JDNeX
JDDR50STNEX	Freză conică cu opritor Ø 5.0 JDNeX
JDDR35STNEXP	Freză conică cu opritor Ø 3.5 Plus JDNeX
JDDR37STNEXP	Freză conică cu opritor Ø 3.75 Plus JDNeX
JDDR40STNEXP	Freză conică cu opritor Ø 4.0 Plus JDNeX
JDDR43STNEXP	Freză conică cu opritor Ø 4.3 Plus JDNeX
JDDR50STNEXP	Freză conică cu opritor Ø 5.0 Plus JDNeX



Frezele cu opritor sunt incluse în kitul chirurgical JDNeXKS

Freze countersink:

JDDR35CSNEX	Freză countersink Ø 3.5 JDNeX
JDDR37CSNEX	Freză countersink Ø 3.75 JDNeX
JDDR40CSNEX	Freză countersink Ø 4.0 JDNeX
JDDR43CSNEX	Freză countersink Ø 4.3 JDNeX
JDDR50CSNEX	Freză countersink Ø 5.0 JDNeX



Opritoare de adâncime:

JDDRST80-1NEX	Opritor L 8 pentru freză Ø 2.0-3.5 JDNeX
JDDRST100-1NEX	Opritor L 10 pentru freză Ø 2.0-3.5 JDNeX
JDDRST115-1NEX	Opritor L 11.5 pentru freză Ø 2.0-3.5 JDNeX
JDDRST130-1NEX	Opritor L 13 pentru freză Ø 2.0-3.5 JDNeX
JDDRST150-1NEX	Opritor L 15 pentru freză Ø 2.0-3.5 JDNeX



JDDRST80-2NEX	Opritor L 8 pentru freză Ø 3.75-4.0 JDNeX
JDDRST100-2NEX	Opritor L 10 pentru freză Ø 3.75-4.0 JDNeX
JDDRST115-2NEX	Opritor L 11.5 pentru freză Ø 3.75-4.0 JDNeX
JDDRST130-2NEX	Opritor L 13 pentru freză Ø 3.75-4.0 JDNeX
JDDRST150-2NEX	Opritor L 15 pentru freză Ø 3.75-4.0 JDNeX




JDDRST80-3NEX	Opritor L 8 pentru freză Ø 4.3-5.0 JDNeX
JDDRST100-3NEX	Opritor L 10 pentru freză Ø 4.3-5.0 JDNeX
JDDRST115-3NEX	Opritor L 11.5 pentru freză Ø 4.3-5.0 JDNeX
JDDRST130-3NEX	Opritor L 13 pentru freză Ø 4.3-5.0 JDNeX
JDDRST150-3NEX	Opritor L 15 pentru freză Ø 4.3-5.0 JDNeX



Opritoarele de adâncime sunt incluse în kitul chirurgical JDNEXKS

Chei de inserare și chei protetice:

JDDREXT	Prelungitor de freză, nou
NEID	Cheie de inserare implant JDNeX
NEIDL	Cheie lungă de inserare implant JDNeX
NESDPF20	Cheie protetică pentru JDTorque L 20 JDNeX
NESDPF25	Cheie protetică pentru JDTorque L 25 JDNeX
NESDPF35	Cheie protetică pentru JDTorque L 35 JDNeX
JDTW	Cheie dinamometrică JDTorque
JDTWA	Adaptor chirurgical pentru JDTorque

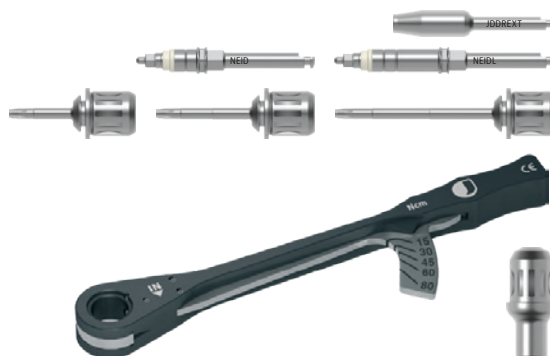

Indicatoare de direcție:

JDDI	Indicator de direcție
JDDIS	Indicator de direcție scurt



Distribuitor în România

www.allonx.ro

+40 744 492 166

contact@allonx.ro

București, Str. Barbu Văcărescu 162, România