




JDENTALCARE  
*just smile*



**ALLONX**  
by Topdent Technic




Approved

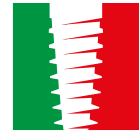

MADE IN ITALY


Ø 2,75mm

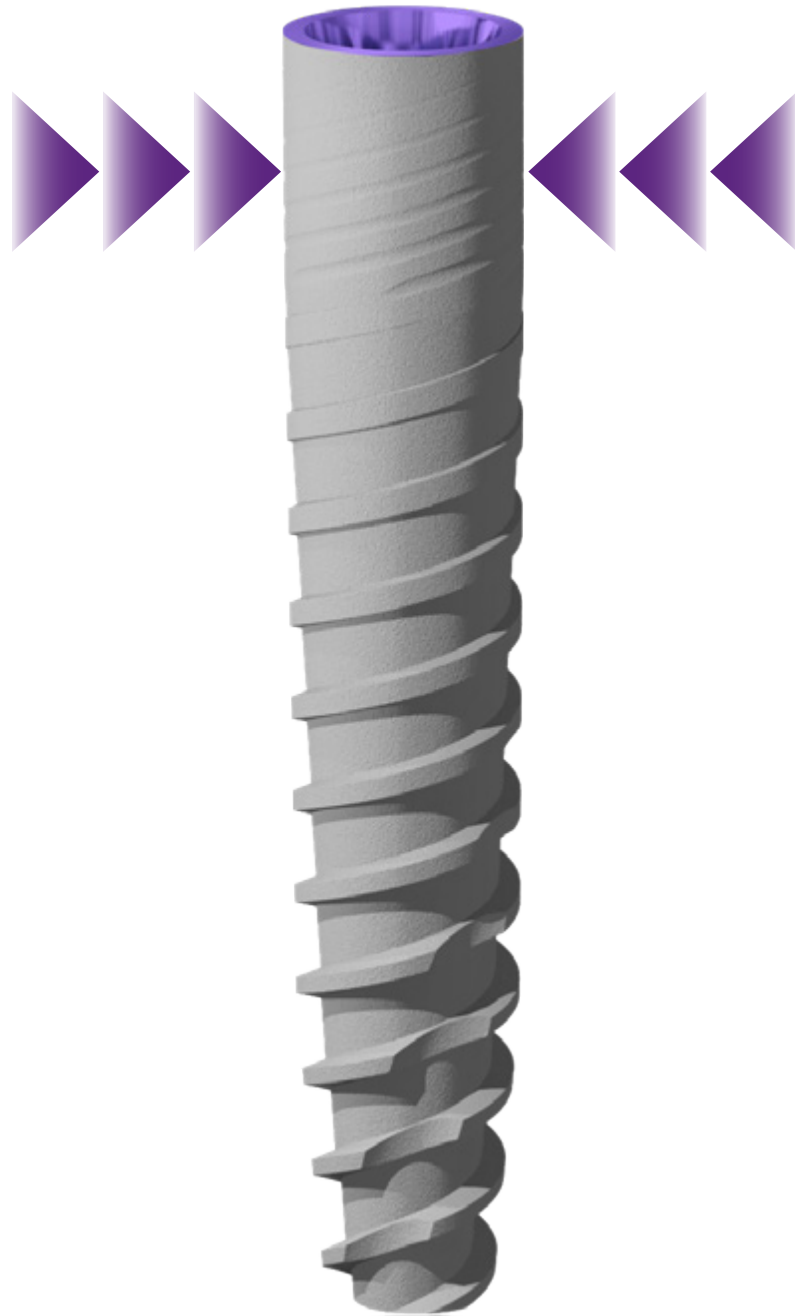

Implant Dentar  
**JDICON ultra.s**

mai mic și mai puternic

## MAI MIC ȘI MAI REZISTENT

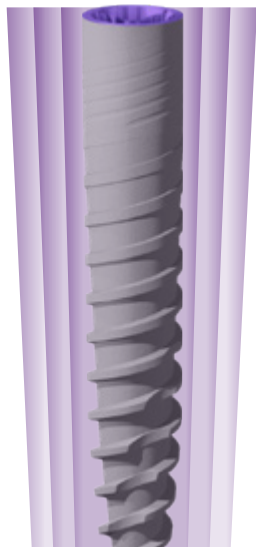

Ø 2,75 mm

JDIcon Ultra S este un implant format din 2 piese, cu un diametru de 2,75 mm și conexiune conică internă.

Este unul dintre cele mai mici implanturi cu conexiune internă fabricate vreodată.

În ciuda diametrului său mic, JDIcon Ultra S oferă o rezistență mare datorită designului său și conexiunii conice strânse.

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Implanturile dentare JDIcon Ultra.S sunt disponibile în lungimile prezentate în tabelul următor:

DIAMETRU IMPLANT	DIAMETRU VÂRF	INTERFAȚA ABUTMENT	DIAMETRU PLATFORMĂ	LUNGIME				
				8	10	11,5	13	15
Ø 2,75	1,95	2,3	2,75					

Notă: toate dimensiunile sunt exprimate în mm



## SECVENȚA DE FORAJ

Se recomandă respectarea indicațiilor secvenței de foraj pentru a asigura o stabilitate primară optimă a implantului.


DIAMETRU IMPLANT	OS MOALE TIP IV	OS MEDIU TIP II-III	OS DENS TIP I
Ø 2,75	1,5 2,0	2,0 2,4	2,0 2,4 2,8*

\*Până la prima marcă laser

Notă: toate dimensiunile sunt exprimate în mm:

Important:

Implantul JDIcon Ultra S este proiectat pentru a rezista la un cuplu maxim de inserție de 60Ncm. Șuruburile protetice JDIcon Ultra S sunt proiectate pentru a rezista la un cuplu maxim de inserție de 20Ncm.

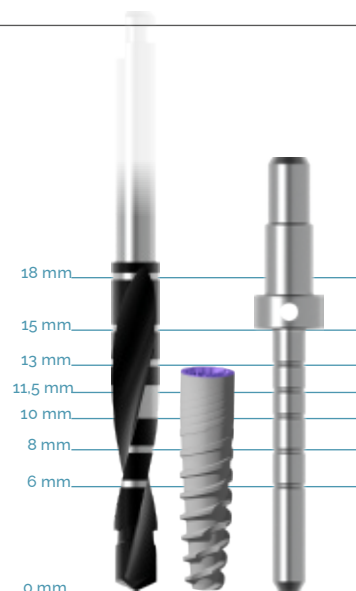


# CATALOG DE PRODUSE

## Implanturi:

### Ø 2.75

IC27080	JDIcon Ultra S Ø 2.75 L 8
IC27100	JDIcon Ultra S Ø 2.75 L 10
IC27115	JDIcon Ultra S Ø 2.75 L 11.5
IC27130	JDIcon Ultra S Ø 2.75 L 13
IC27150	JDIcon Ultra S Ø 2.75 L 15

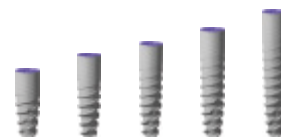

## Șurub de acoperire:

ISCS	Cover Screw JDIcon Ultra S
------	----------------------------



## Bonturi de vindecare:

ISHA323	Healing Abutment Ø 3.2 H 3.0 JDIcon Ultra S
ISHA325	Healing Abutment Ø 3.2 H 5.0 JDIcon Ultra S
ISHA327	Healing Abutment Ø 3.2 H 7.0 JDIcon Ultra S
ISHA403	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Ultra S
ISHA405	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Ultra S
ISHA407	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Ultra S




## Copiator pentru Amprentă:

### OPEN TRAY

ISICOT32C	Impression Coping Open Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra S
ISICOT40C	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra S

### CLOSED TRAY

ISICCT32C	Impression Coping Closed Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra S
ISICCT40C	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra S

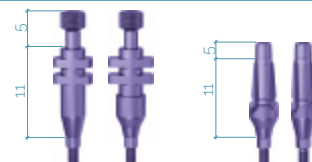

## Șurub Protetic:

ISS	Prosthetic Screw JDIcon Ultra S
ISSA	Prosthetic Screw Angulated JDIcon Ultra S

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont Temporar:

ISTAEC	Temporary Abutment Engaging JDIcon Ultra S
--------	--

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont GP:

ISGP32C	GP Abutment Ø 3.2 JDIcon Ultra S
ISGP40C	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Ultra S
IS15GPA40C	GP Abutment 15° Ø 4.0 JDIcon Ultra S

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont din aliaj de crom-cobalt:

ISCEC	Cobalt-Chrome Abutment Engaging JDIcon Ultra S
EVCACCNEC	Cobalt-Chrome Conical Abutment Non Engaging JDEvolution

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont din ceară:

ISWAEC	Wax-Up Abutment Engaging JDIcon Ultra S
--------	---

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont drept:

ISSA4020C	Straight Abutment Ø 4.0 H 2.0 JDIcon Ultra S
ISSA4040C	Straight Abutment Ø 4.0 H 4.0 JDIcon Ultra S

Torsiunea recomandată: 20 Ncm



## Bont conic:

ISCA15C	Conical Abutment H 1.5 JDIcon Ultra S
ISCA1725C	Conical Abutment Angulated 17° H 2.5 JDIcon Ultra S
ISCASA	Conical Abutment Angulated Screw JDIcon Ultra S

Torsiunea recomandată: 20 Ncm




## TiBase, JDScanBody și Implant Replica CAD CAM:

ISSBCEC	ScanBody Engaging JDIcon Ultra S
EVCASBCEC	ScanBody Conical Abutment JDEvolution
EVCASBCEEC	ScanBody Engaging Conical Abutment
EVCASBCECSC:	On Top ScanBody Conical Abutment JDEvolution Plus*
ISTIBC	TiBase JDIcon Ultra S
ISTIBNC	TiBase New JDIcon Ultra S
ISTIB15NC	TiBase New H 1.5 JDIcon Ultra S
ISTIB30NC	TiBase New H 3.0 JDIcon Ultra S
EVCAITEC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Engaging JDEvolution (H 7.5)
EVA139C	TiBase Engaging for Conical Abutment (H 5.0)
EVCAITC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Non Engaging JDEvolution (H 7.3)
EVCATIBC	TiBase for Conical Abutment JDEvolution (H 5.0)
ISANCN	Implant Replica CAD CAM New JDIcon Ultra S
ISPMNC	Pre-milled Abutment Blank JDIcon Ultra S



## Bont Sferic:

ISBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Ultra S
ISBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Ultra S
ISBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Ultra S
EVBAAC	Ball Abutment Replica
EVBAHC	Ball Abutment Elastic Retention Cap w/ Container
EVBAN	Ball Abutment Retention Cap

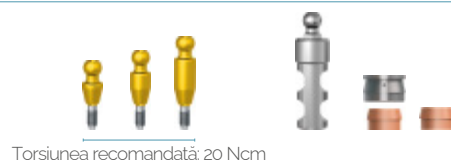


## Replica implantului:

ISAN	Implant Replica JDIcon Ultra S
------	--------------------------------



## Driver-e pentru implanturi și proteze:

SID	Implant Driver JDIcon Ultra S
SIDL	Implant Driver Long JDIcon Ultra S
EVSDPF15	Prosthetic Driver for JDTorque L 15
EVSDPF20	Prosthetic Driver for JDTorque L 20
EVSDPF25	Prosthetic Driver for JDTorque L 25
EVSDPF35	Prosthetic Driver for JDTorque L 35
EVSDPF60	Prosthetic Driver for JDTorque L 60
EVSDCAF	Conical Abutment Driver for JDTorque
EVSDP20	Prosthetic Driver L 20
EVSDP25	Prosthetic Driver L 25
EVSDP30	Prosthetic Driver L 30
JDPD103	Prosthetic Driver for Surgical Driver
EVSDCA	Conical Abutment Driver
EVSDPF25A	Angulated Screw Driver for JDTorque L 25
EVSDPF30A	Angulated Screw Driver for JDTorque L 30
JDG	JDGuide
ISGMC	Implant Mounter for JDIcon Ultra S

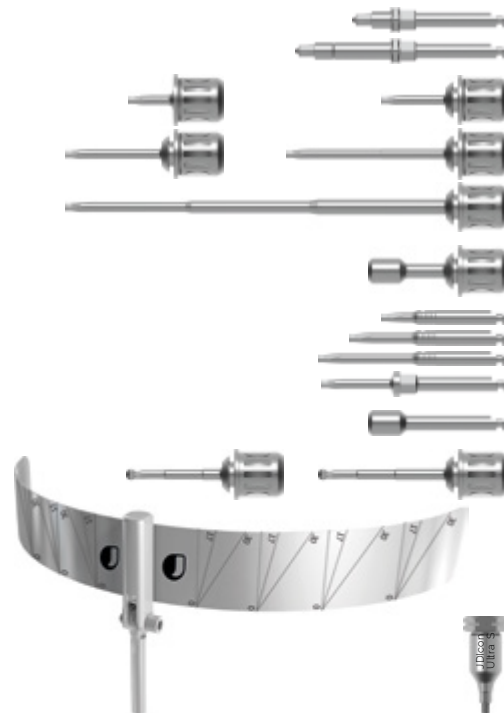

## Indicatoare de direcție:

JDDI	Direction Indicator
JDDIS	Direction Indicator Short
JDDI17	Direction Indicator 17°



REPREZENTANT AUTORIZAT JDENTALCARE ROMANIA

S.C TOPDENT TECHNIC SRL / CUI : 43646472

BUCURESTI , STR.BARBU VACARESCU 162

EMAIL : CONTACT@ALLONX.RO

CONTACT : +4074492166

WEB : WWW.JDENTALCARE.RO

E-SHOP : WWW.ALLONX.RO

